

■品番 TW-320

サイズ	W570×D655×H805～980 (8段階)
折りたたみサイズ	W570×D390×H860 (脚固定ベルト使用)
座面	W380×D230×H500
グリップ	385 (内寸)
キャスター径	200φ
重量	10kg
耐荷重	80kg
バッグ容量	9ℓ


- 材質 / スチール・ステンレス・アルミ・ナイロン (単位 mm)
 ●カラー / オレンジ TAISコード 00297-000118

■カラー



オレンジ

■寸法図

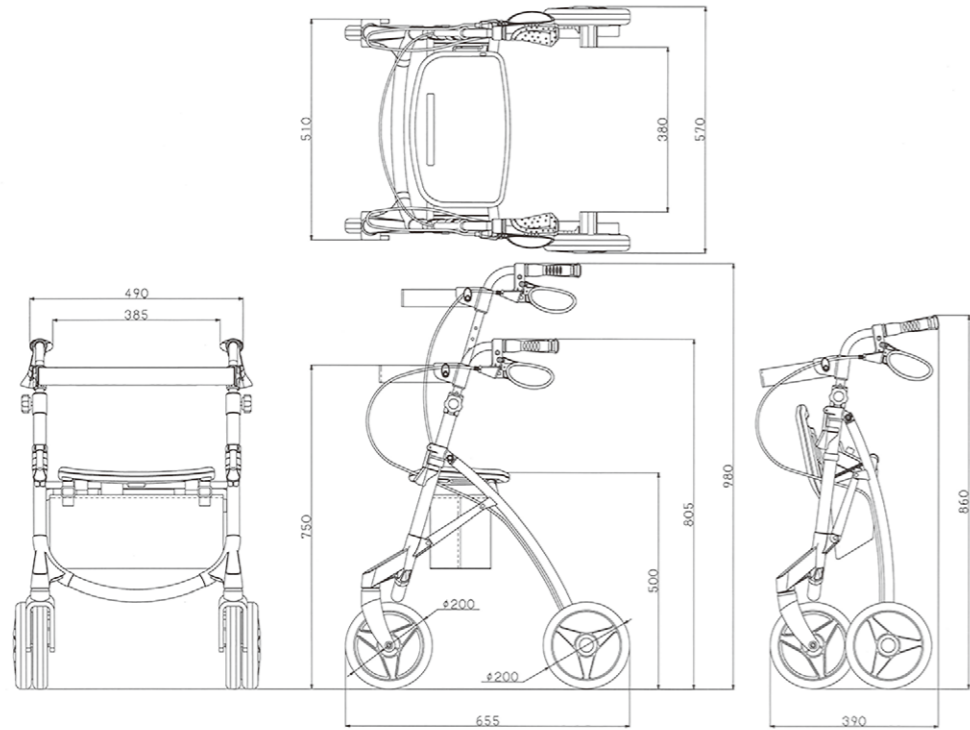

速度制御機能付き歩行車

U Walker II

ユーウォーカー 2

製品カタログ

行きたいところへさあ出かけよう。



心を形にするテクノロジー、あります。
TAKANO HeartWorks

タカノ株式会社

〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原 5331
 TEL.0265-72-3157 FAX.0265-72-3203

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-825-845

受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00
 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

<https://www.takano-hw.com>

E-mail:fukushi@takano-net.co.jp Rev.4.2022.10



タカノ
 ハートワークス
 WEBサイト

仕様は予告なく変更することがあります。カラーは印刷のため、実物と異なって見えることがあります。

お問い合わせ



TAKANO HeartWorks

U Walker II の機能

¥89,000
(非課税)

速度制御機能付き歩行車。
強弱調整・オンオフ切り替えも簡単！
使いたくなるシンプルなデザインで
リハビリや毎日の外出に。



U Walker II

ユーウォーカー 2

コンパクトに折りたたみ可能

脚開閉レバーをあげて、簡単に折たたむことができます。さらに開き止めの脚固定ベルトを使用し、たたんだ状態をキープできます。



開き止めで
安心・安全

脚固定ベルト

工具不要で 速度制御機能をオンオフ

ダイヤルを回して速度制御機能のオン/オフを切り替えます。工具の必要がありません。



強度の高い
制御機構

ハンドブレーキ/ロック機能

ブレーキレバーを握ると後輪にブレーキがかかります。ブレーキレバーを下に押すと後輪にロックがかかります。



ブレーキがかかる

ロックがかかる

ハンドルの 高さ調節機能

ハンドルは805~980mmを8段階で調節することができます。



高さ最大
980mm



見やすい
数字表記

ダイヤル操作で 簡単速度調節

速度制御機能オンの時は歩き出しから制御がかかり、強さは6段階で調節できます。



便利な 9Lバッグ

小物を入れるのに便利な9Lバッグがついています。



Point 1 /

充電いらずの 速度制御機能を搭載

充電不要の速度制御機能が搭載されています。ダイヤルを回すだけで簡単に速度制御のオン/オフが切り替えられます。



Point 2 /

歩き出しから 制御がかかるから 坂道も安心!

速度制御機能がオンの時は、歩き出しから制御がかかるので安心です。制御の強さも6段階で調節できます。



Point 3 /

ハンドル高が 最大980mmで 高身長の方でもOK!

最大980mm・8段階の高さ調節が可能です。お使いいただく方の体格に、幅広く合わせることができます。



最大
980mm

