

車椅子上での体圧分散

洗浄・通気性に優れたクッション


座楽

TEH・RAKUICHI




長時間座る方の事を考えた「3つの楽ポイント」

楽1 64個のブロックが、しっかり体圧分散、「ズレカ」も軽減

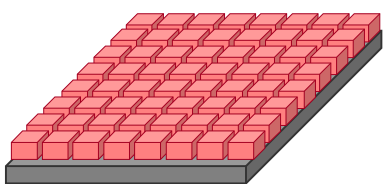


- スクエア（四角）がお尻を「点」で支え、体圧を分散
- 1個1個のスクエアが独立し、ズレを軽減
- 2層の硬さの違う低反発ウレタンが程良く体圧分散、長時間座っても疲れない

上層：柔らかく、しっかり体圧を分散
下層：少し固めで、底突きさせない

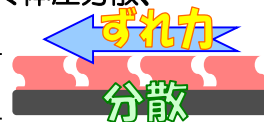

楽2 お手入れ簡単、清潔に


- クッション本体は家庭用洗濯機で丸洗い可、乾燥機も可。いつでも清潔、臭いも解消！

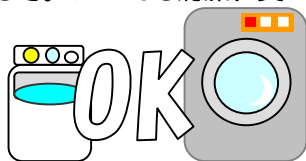

注：カバーに関しては取外して、手洗いで下さい

楽3 優れた通気性

- クッション本体は「特殊な低反発ウレタン」と、「スクエア構造」でムシを防ぎます
- クッションカバー裏面はメッシュ地になっており、より空気を通す構造

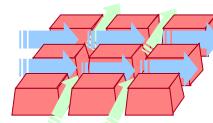

商品名：「座・楽一」(ざ・らくいち)

JAN 4562147680300

本体価格：26,400円(消費税込)

規格：40cm×40cm×6cm

材質：本体：特殊ウレタンフォーム
カバー：ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル

開発製造販売元 株式会社あかね福祉
TEL：024-937-5022

洗濯方法

本体：家庭用洗濯機（95℃までの温水可）
塩素系洗剤は×（洗濯ネットの使用をお勧めします）
乾燥機（100℃まで可）
カバー：手洗い（30℃まで、洗濯機は×）
塩素系洗剤は× 乾燥機×



商品のご注文は各販売店様にご相談ください